

TEKNO SHAVER TM940

TEKNO SHAVER TM940



⌀ 3.0 mm - 85 mm	tk 39802-200	tk 39802-210	-
⌀ 3.0 mm - 130 mm	tk 39802-300	tk 39802-310	-
⌀ 4.0 mm - 130 mm	tk 39802-400	tk 39802-410	tk 39802-420
⌀ 5.0 mm - 130 mm	tk 39802-500	tk 39802-510	-
⌀ 5.5 mm - 130 mm	-	-	-

Pitbull Wave Cutter Synovia Cutter



⌀ 4.0 mm / ⌀ 5.5 mm - 130 mm	tk 39802-430	tk 39802-440
⌀ 5.5 mm / ⌀ 7 mm - 130 mm	tk 39802-630	tk 39802-640

Barrel Bur Round Bur

tk 39802-10

Instrumentenfett für Cutter und Burs
Grease for Cutter and Burs

distributed by



TEKNO-MEDICAL Optik-Chirurgie GmbH
Sattlerstrasse 11 - 78532 Tuttlingen, Germany - www.tekno-medical.com
Phone +49 (74 61) 17 01-0 - Fax +49 (74 61) 17 01-50 - mail@tekno-medical.com

Shaver blades are manufactured for TEKNO-MEDICAL by
REGER Medizintechnik GmbH, Gewerbestraße 10, 78667 Villingendorf

TEKNO ORDER NUMBERS REFER TO FOLLOWING REGER REF. NUMBERS:

tk 39802-200 ≅ DRVI 829-302-085R, tk 39802-300 ≅ DRVI 829-302-130R, tk 39802-400 ≅ DRVI 829-102-130R, tk 39802-500 ≅ DRVI 829-202-130R, tk 39802-210 ≅ DRVI 829-301-085R, tk 39802-310 ≅ DRVI 829-101-130R, tk 39802-510 ≅ DRVI 829-201-130R, tk 39802-420 ≅ DRVI 829-103-130R, tk 39802-430 ≅ DRVI 829-104-130R, tk 39802-630 ≅ DRVI 829-604-130R, tk 39802-440 ≅ DRVI 829-105-130R, tk 39802-640 ≅ DRVI 829-605-130R

0086_TM 950



TEKNO-MEDICAL Optik-Chirurgie GmbH
Sattlerstrasse 11 - 78532 Tuttlingen, Germany - www.tekno-medical.com
Phone +49 (74 61) 17 01-0 - Fax +49 (74 61) 17 01-50 - mail@tekno-medical.com



ENDOSCOPY - SURGERY - DENTAL



ARTHROSKOPIE SHAVER TM940

ARTHROSCOPY SHAVER TM940

TEKNO SHAVER TM940

TEKNO SHAVER TM940

Das neue Shaver System TM940 ist für operative Eingriffe in kleinen und großen Gelenken konzipiert. Das Gerät ist klar und bedienerfreundlich aufgebaut, welches dem Anwender erlaubt die Funktionen wahlweise direkt am Steuergerät, Handstück oder über den Fußschalter einzustellen. 9 voreingestellte Oszillier-Modi sowie ein optionales Modul zum Einblenden der Parameter in das Monitorbild, runden das Shaver System TM940 in seiner Anwenderfreundlichkeit ab.

Das autoklavierbare Handstück verfügt über 2 doppelbelegbare Druckknöpfe. Es lassen sich folgende Funktionen über das Handstück steuern: Drehrichtung, Oszillationsmodus, Start/Stop und Open Window* Funktion. Darüber hinaus ist das ergonomische Handstück noch leichter, als seine Vorgängerversionen und bietet dem Anwender somit mehr Komfort. Der rutschfeste und abgedichtete Fußschalter kann dieselben Funktionen wie das Handstück steuern und zusätzlich die Geschwindigkeit regulieren.

*Diese Funktion erlaubt es eine gewünschte Position des Blades festzulegen, in welche es jederzeit nach der Rotation zurückkehrt.



CONTROL UNIT TM940

tk39802-01

Power supply	100-240 VAC
Power consumption	65 VA
Dimensions (W x H x D)	330 x 96 x 250mm
Weight	4.8kg
Class of protection	I
CE standard	EN 60601-1:2006+A1:2013; EN 60601-1-2:2015



HANDPIECE TM940

tk39802-02

Length	164mm
Weight	325g
Shaver blade chuck	Automatic
Speed range	FWD, REV: 500 - 8000 RPM (+/- 10%), OSC: 500 - 3500 RPM (+/- 10%)
Cable length	3.2m
Autoclavable	134 °C

The new shaver system TM940 has been designed for surgical procedures in small and large joints. The unit is constructed explicit and user-friendly, which allows to control its functions via control unit, handpiece or footswitch. 9 oscillation modes and an optional module to show significant parameters on the monitor, complete the shaver system TM940 in its operator convenience.

The autoclavable handpiece is equipped with 2 double allocatable buttons. Following functions can be controlled via the handpiece: direction, oscillation mode, start/stop rotation and open window calibration. Furthermore the ergonomic handpiece is much lighter than its previous versions and offers more comfort to the user. The non-slip and sealed foot pedal can control the same functions like the handpiece and can additionally control the speed.*

**This feature allows to set up a desired position of the blade and it will always return to this position after rotation.*



FOOTSWITCH TM940

tk39802-03

Dimensions (W x H x D)	280 x 28 x 215mm
Weight	2.1kg
Cable length	3.2m



TEKNO SHAVER SYSTEM


TM940

tk39802-00

Komplett mit Steuereinheit, Handstück und Fußschalter
Complete with control unit, handpiece and footswitch

TEKNO SHAVER TM940

TEKNO SHAVER TM940

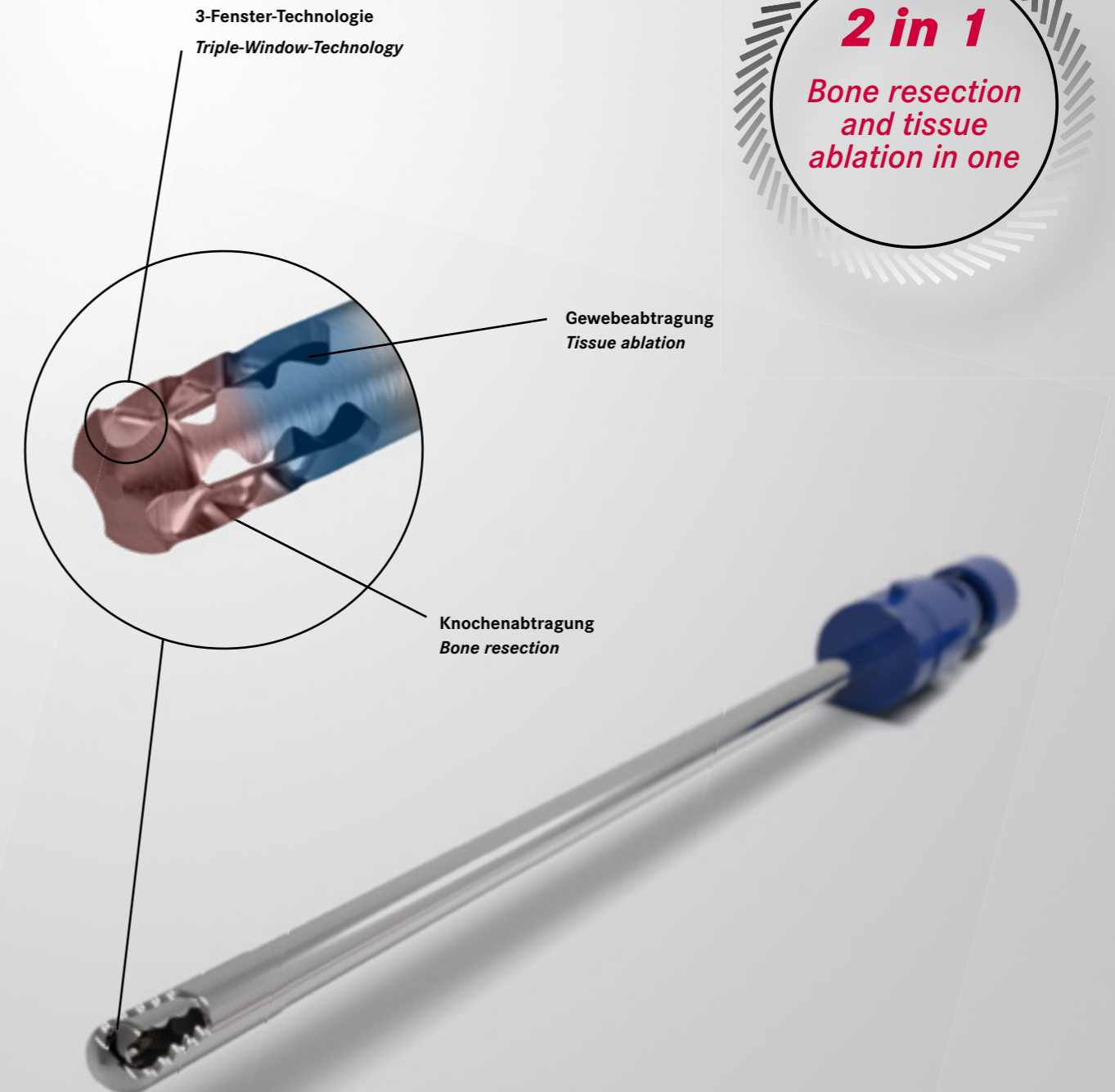

3-Fenster-Technologie (patentiert)

Durch die 3 innovativen Öffnungen (Fenster) an der Spitze des Shaver Blades ist er sehr scharf und viel effizienter als herkömmliche Shaver Blades mit nur einer Öffnung. Knochen und Gewebe können mit nur einem Blade abgetragen werden. In den meisten Fällen ist kein zweites Blade notwendig, was Kosten und Zeit spart.

Triple-Window-Technology (patented)

Due to the 3 innovative windows at the tip of the Shaver Blades, it is very sharp and much more efficient than conventional Shaver Blades with only one window. Bones and tissue can be resected with only one blade. In most of the cases no second blade is needed which saves cost and time.